

synergydental

Medit i700



MEDIT
i700

Libérez
le potentiel
de votre
clinique




Numérisation réinventé


Medit a été à l'avant-garde de la réalisation de l'entrée facile dans la dentisterie numérique.

Notre innovation améliorera l'expérience de votre patient.

Comment développer un produit au-delà de l'imagination des utilisateurs ?

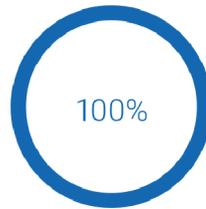

100% des patients préfèrent les impressions numériques

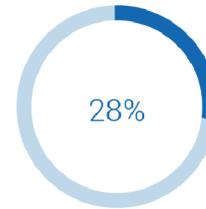

28% des dentistes ont déjà des scanners intraoraux



Le nombre de propriétaires de scanners intraoraux devrait augmenter de 12 % par année

Nous croyons que la dentisterie numérique libérera le potentiel de votre clinique. Imaginez comment la dentisterie numérique peut vous changer, vous, vos patients et la vie de vos partenaires de laboratoire.


À cette fin, Medit ne cesse d'évoluer les systèmes de numérisation avec des mises à niveau continues des produits.

Medit réinvente la numérisation.

Premier coup d'oeil sur le Medit i700

Medit i700 fait l'expérience d'une numérisation confortable pour le dentiste et le patient.

Avec du matériel puissant et des logiciels intelligents, le Medit i700 est la clé pour libérer tout le potentiel de votre clinique.

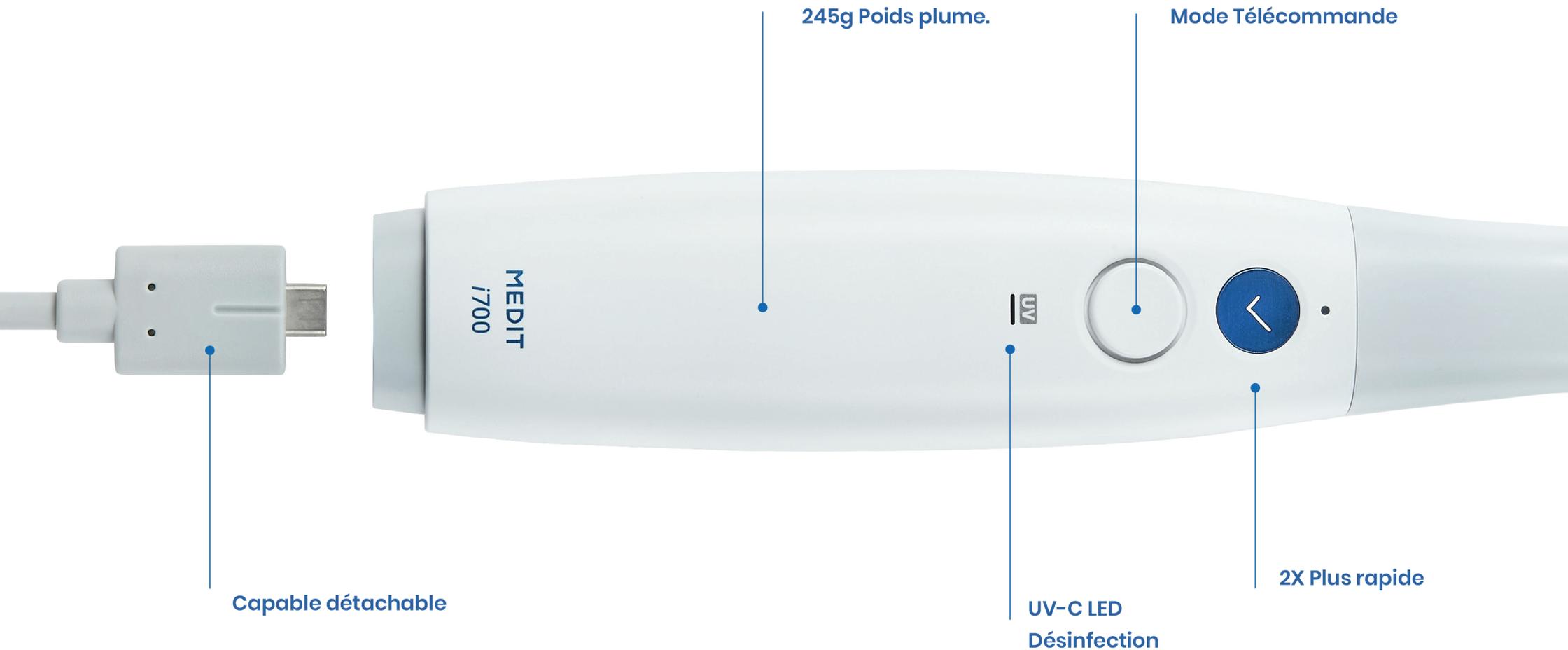


180 ° Pointes réversibles



Medit Plug & Scan

Contrairement à la plupart des scanners sur le marché, **Medit i700** peut être directement connecté au PC en utilisant le câble de livraison d'énergie sans concentrateur électrique et câbles supplémentaires. Cette nouvelle fonctionnalité de **Medit i700** améliore la mobilité et la maintenance.

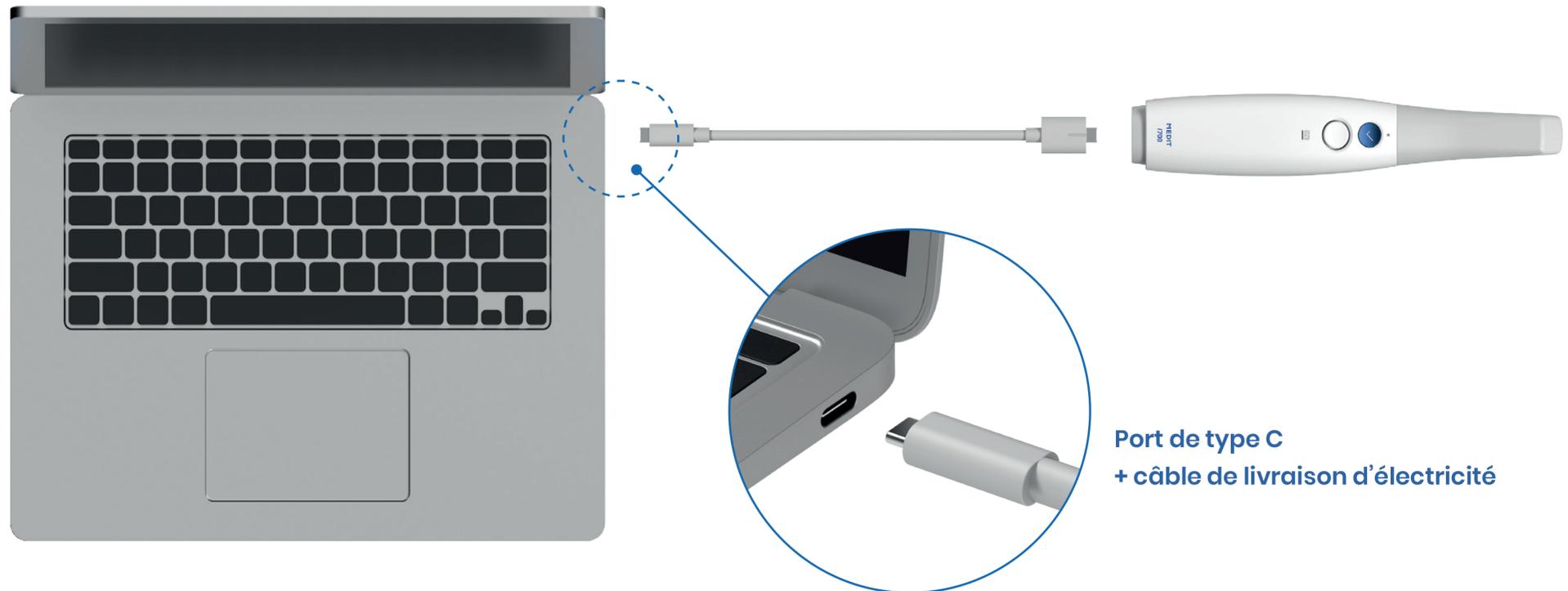

Medit Link

Medit Link est un logiciel open source pour vous.



Tableau de Bord



Gestion du flux
de travail




Cloud Service



Communication
Patients


Scannez avec des fonctionnalités intelligentes gratuites et des applications spécialisées pour vos procédures dentaires. Améliorez l'expérience de consultation avec votre patient afin d'offrir de meilleures options de traitement. Améliorez votre communication avec les laboratoires grâce à un système cloud en temps réel. **Medit** est l'une des entreprises les plus rapides de l'industrie à fournir des mises à niveau logicielles. Les utilisateurs peuvent obtenir un scanner renouvelé avec des performances améliorées et de nouvelles fonctionnalités grâce à des mises à niveau logicielles seules.

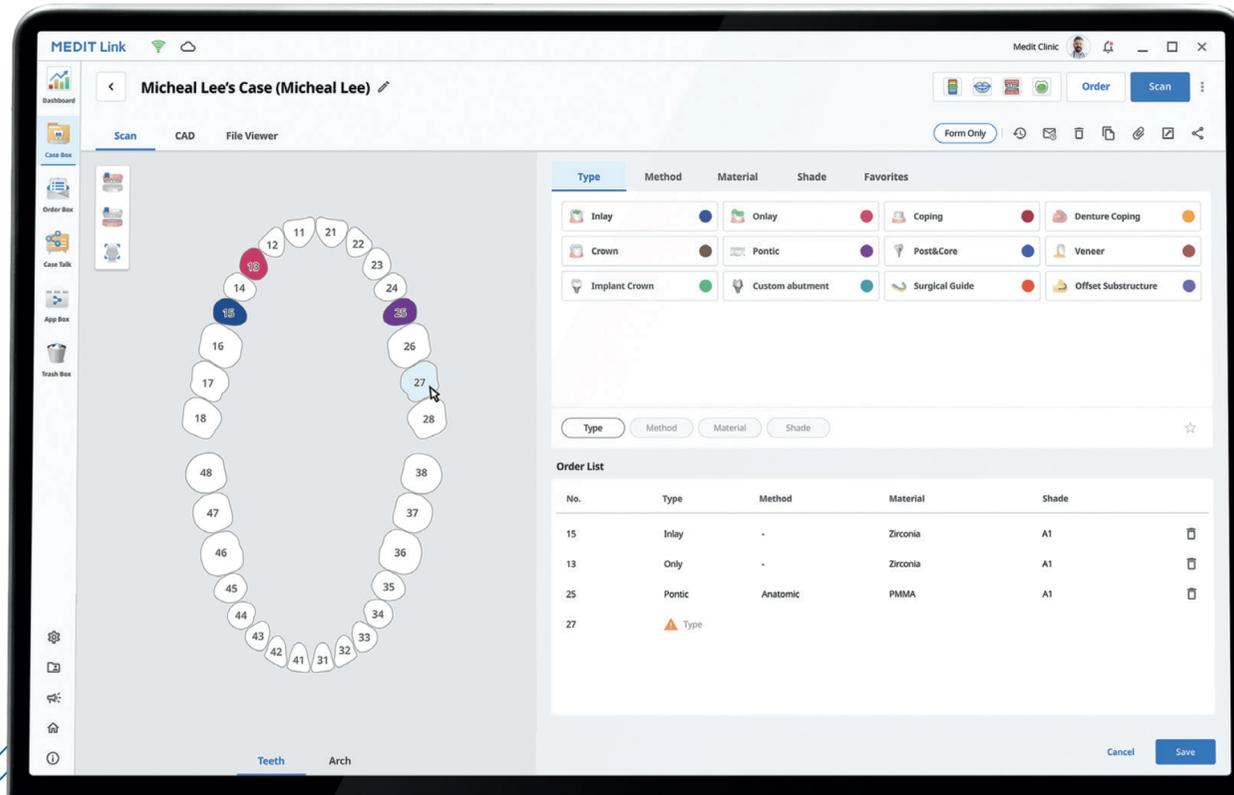

synergydental


Scan & Communiquer

Smart Scan Filtrage Intelligent

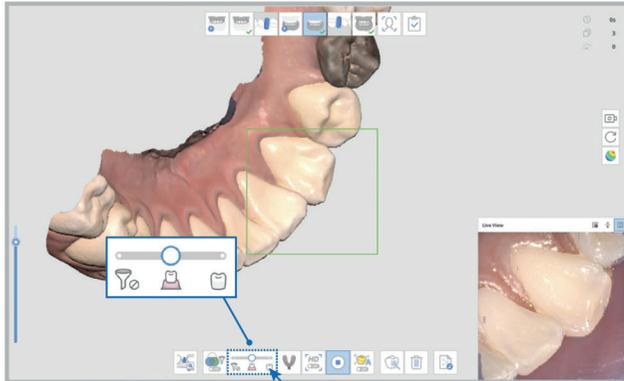


Éliminez les données inutiles sur les tissus mous, ce qui est l'un des plus grands défis lors de l'exécution des analyses.

Medit Ortho Simulation

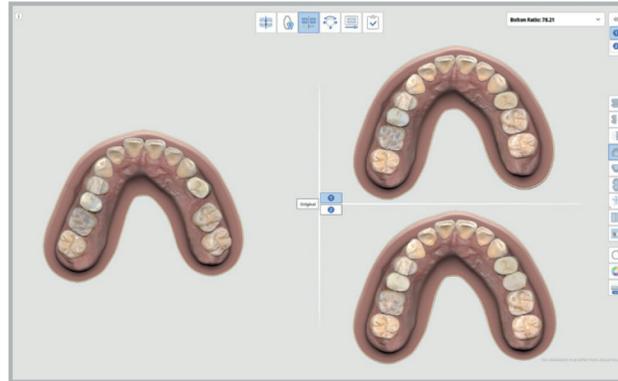


Aidez le patient à visualiser les résultats potentiels d'un traitement orthodontique.

Service cloud

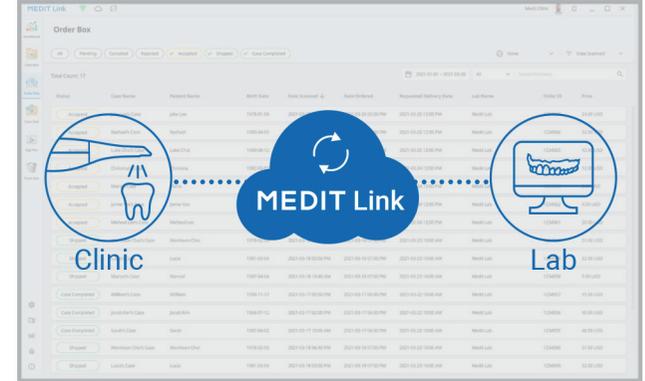

Stockez toutes les données dans le cloud. Travaillez sur vos analyses originales, archivez vos impressions et commandes numériques, gérez vos cas où que vous soyez.

Filtrage intelligent des couleurs

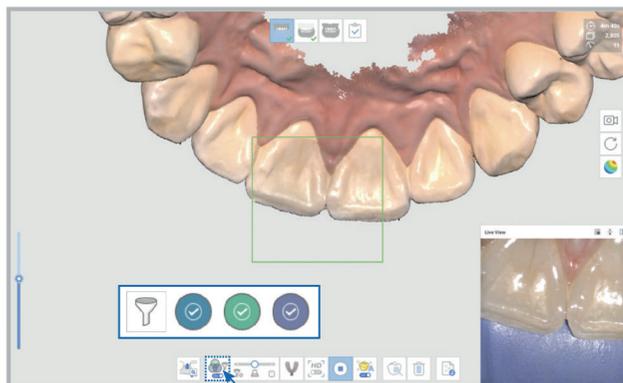


Filtrez automatiquement la couleur pendant la numérisation, réduisant le nombre d'artefacts et rendant la rétractation plus facile.

Conception du sourire



Montrez au patient son futur sourire ou aidez-le à envisager un traitement par broches.


Visionneuse web et cause conversation

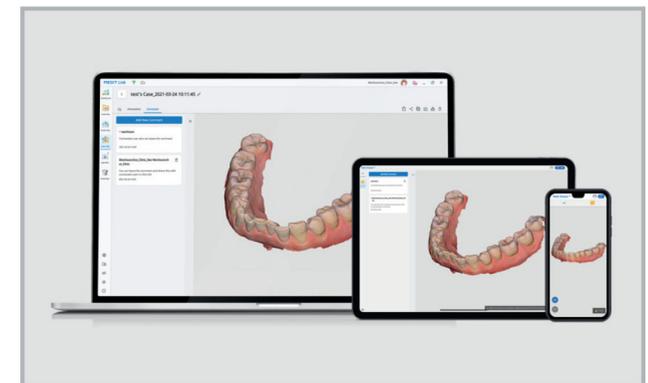

Faites l'expérience d'une communication plus fluide, avec les partenaires. Consultez les données de numérisation sur n'importe quel appareil et partagez des notes. Toutes les données sont stockées en toute sécurité.

Types de traitement

Création de lignes de marge

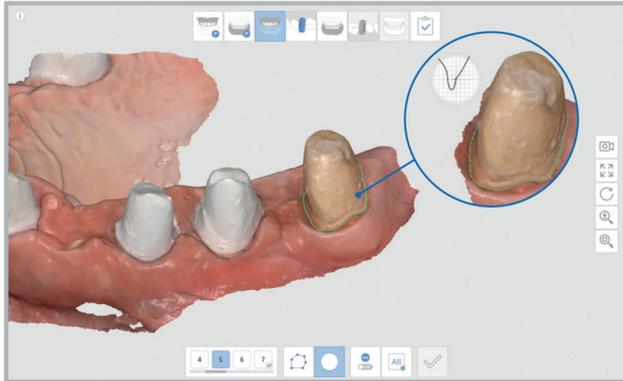


Choisissez entre permettre au système de générer automatiquement la ligne de marge pour n'importe quelle dent ou de la créer manuellement

Balayage de prothèse




Scannez les patients edentulous, ou la surface intérieure de la prothèse dentaire. Utilisez des jantes ou des prothèses dentaires de cire pour effectuer l'alignement occlusif.

Appariement des butées

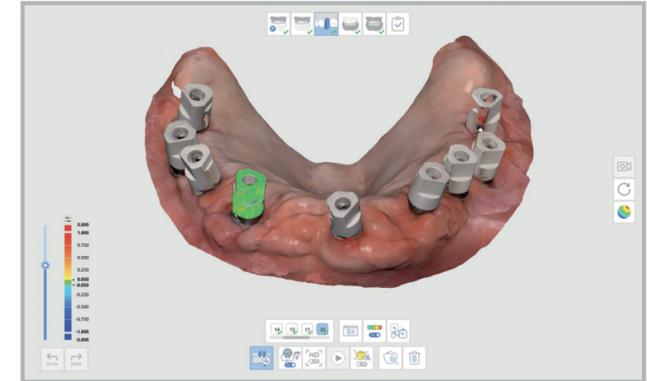


Les culbutages et les corps de balayage sont automatiquement appariés et alignés avec les données d'analyse. Utilisez cette fonction pour des travaux en aval tels que la CAO.

Ajustement de couronne

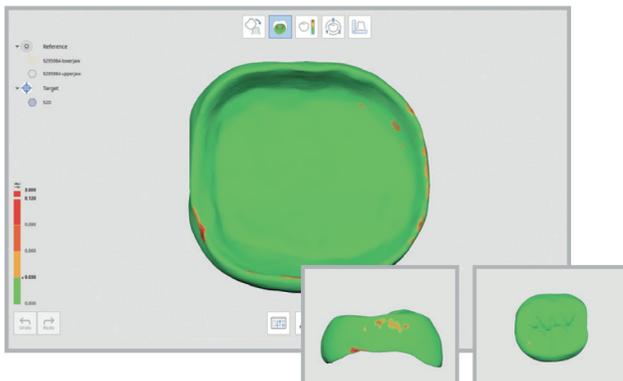

Effectuez un raccord de couronne sans mode. Le logiciel peut révéler où des modifications peuvent être nécessaires.

Numérisation d'impression

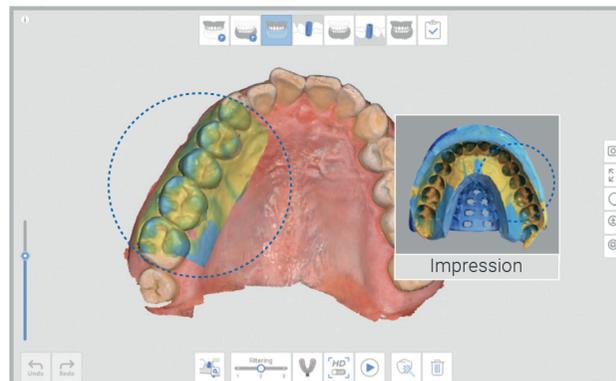

Obtenez les données des zones difficiles à numériser à l'aide d'une impression, numérisez-les et combinez-les avec les données intraorales.

Scan du visage



Numérisez le visage de votre patient, importez des données 3D sur le visage et les données osseuses, et alignez tous ces ensembles de données pour obtenir un résultat final plus complet.



Dr. Marko Tadros
Prosthodontist

L'i700 est une vitrine technologique dans tous les aspects. Medit l'a encore fait en fournissant un scanner encore plus rapide et plus précis pour la pratique clinique quotidienne



Dr. Michael Scherer
Prosthodontist

Le nouveau Medit i700 facilement et prévisible intégré dans chaque partie de mon bureau et laboratoire axé sur la dentisterie numérique. De la numérisation à la conception, en sorte que l'impression et le fraisage, Medit a trouvé comment tout faire fonctionner !



Dr. Vas Srinivasan
Orthodontist

Nous avons eu la chance de commencer à utiliser Medit quand ils étaient nouveaux sur le marché orthodontique et aligner clair. Les scanners Medit depuis lors, d'abord l'i500 et maintenant l'i700, et l'équipe derrière eux, ont changé la façon dont nous fournissons des soins dentaires à nos patients.



Prof. Katalin Nagy
OMS, Prosthodontist

Je suis reconnaissant pour le désir constant de Medit d'améliorer le niveau de soins en dentisterie numérique. La création d'un modèle virtuel utilisant des données 3D s'est avérée inestimable tant pour mes étudiants que pour les patients lorsqu'il s'agit de tous les aspects des soins, y compris le diagnostic, la planification et l'acceptation du traitement.



Dr. Mark T. Murphy
General Dentist

L'i700 a vraiment dépassé toutes mes attentes et simplifié ma pratique du sommeil. Il est rapide, léger et petit, mais il capture une grande zone de balayage. La pointe réversible, le bouton de télécommande et la capacité intégrée de désinfection UV ont également été des surprises fantastiques.




Dr. Isaac Tawil
General Dentist

L'i700 est devenu mon scanner go-to. J'ai été stupéfait par la vitesse et la qualité. Le miroir angulé a rendu la capture des contacts inter proximaux beaucoup plus facile. Une autre innovation majeure de l'entreprise s'est rapidement imposé au sommet du domaine de la numérisation intraorale.


Ce que nos **utilisateurs** disent de leur *expérience*



Fantastic

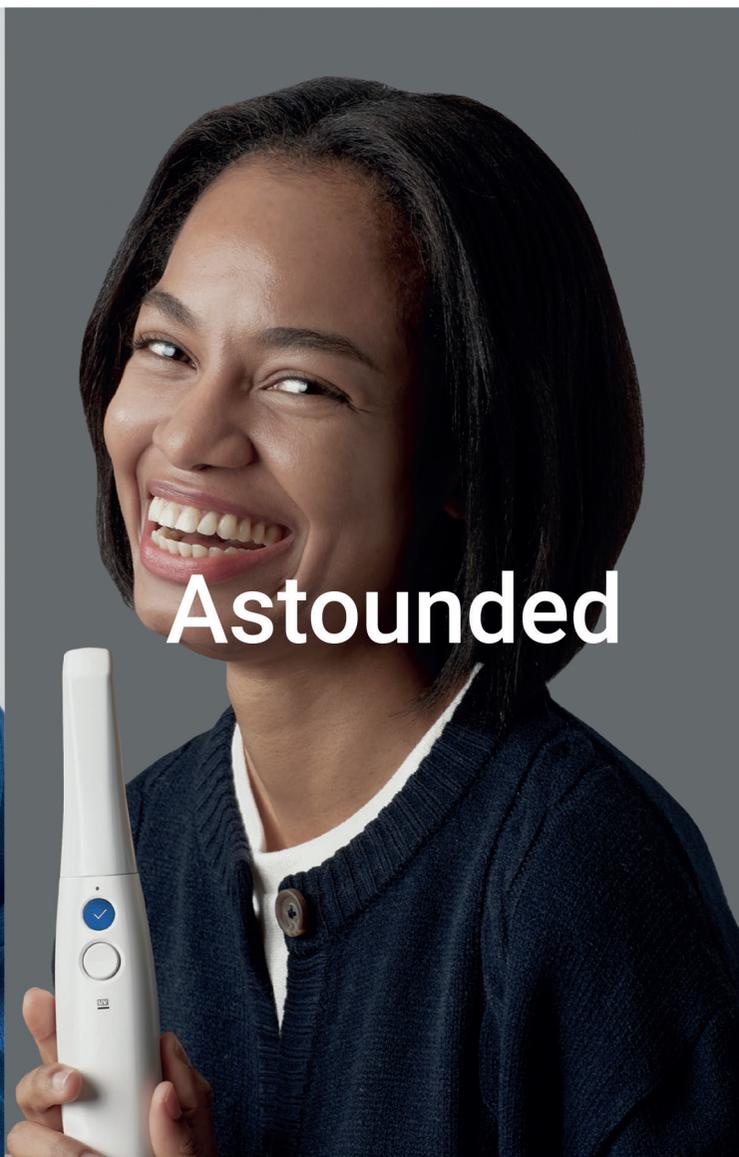

Astounded

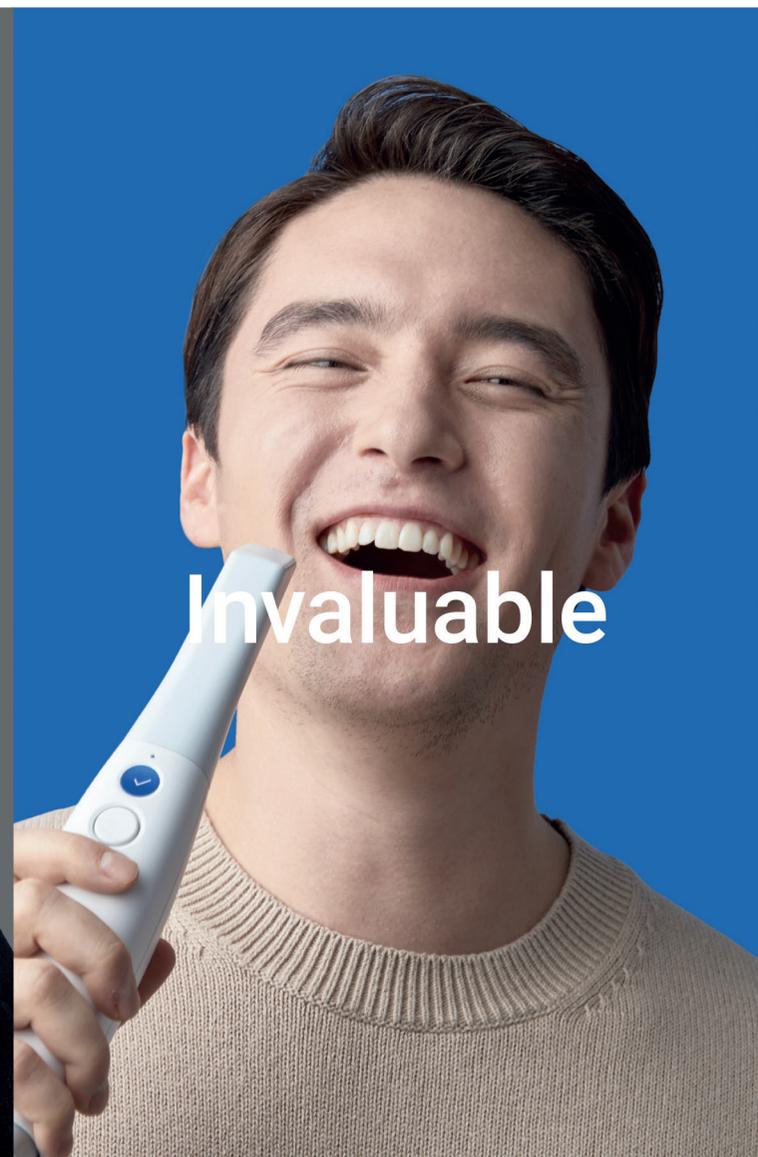

Invaluable

Utilisez les données de numérisation **Medit i700** pour un large éventail d'applications

Votre système d'ouverture Medit Link vous permet d'utiliser vos données d'analyse pour toutes sortes de flux de travail, avec n'importe quel logiciel qui permet l'importation de fichiers STL, PLY et OBJ.

Cela signifie que vous pouvez utiliser nos données d'analyse pour :

**Clear aligners | Crown and bridges | Implant-supported restorations | Full and partial dentures
Orthodontics | Implant surgical guides | Sleep apnea devices | Dental models | 3D printing...**



synergydental

...and more!

Profitez de travailler avec
une variété de partenaires
dans différents projets !



Communauté **Medit**

Nos utilisateurs ont toujours été au cœur de tout ce que nous faisons, et nous sommes fiers d'avoir bâti une communauté qui non seulement nous donne des commentaires et des suggestions constants, mais qui se soutient et s'entraide activement. Pour nos efforts de développement communautaire, nous avons reçu le prix du meilleur soutien communautaire aux iDD Intraoral Scanner Awards 2020.

Mais nous ne nous sommes pas contentés de créer une communauté. Nous avons également créé une bibliothèque de ressources pour que vous puissiez apprendre en déplacement. Vous pouvez consulter des didacticiels vidéo sur notre chaîne YouTube Medit Academy ou lire des articles d'aide dans notre centre d'aide. Au-delà de la formation et de l'assistance de nos partenaires de distribution, vous pouvez également contacter notre équipe d'assistance technique dédiée si vous avez des questions ou rencontrez des problèmes, ce qui signifie que vous n'aurez jamais à vous soucier d'être seul dans votre parcours de numérisation. Alors qu'attendez-vous encore ?

Rejoignez la révolution numérique de la dentisterie et profitez de l'expérience Medit >>



User Group



Medit Academy



Help Center

synergydental

Spécificités

synergydental

Catégorie		Medit i700
Technologie de numérisation	Cadre de numérisation	Jusqu'à 70 FPS
	Technologie d'imagerie	Technologie vidéo 3D en mouvement Capture en continu en couleur 3D
	Source lumineuse	LED
	Technologie antibuée	Antibuée adaptatif
Précision	Arc complet	10.9µm ± 0.98
Pièce à main	Dimension	248 x 44 x 47.4 mm
	Poids	245 g
Conseil	Taille de la pointe	22.2 x 15.9 mm
	Angle du miroir	45-degree angle <i>Easier to scan distal molar area</i>
	Zone de numérisation	15 x 13 mm
	Autoclavable	Up to 100 times Autoclave 121°C 30 mins Autoclave 134°C 4 mins
	Pointe réversible	Oui
Mode spécial	Mode de contrôle à distance	Oui
	Désinfection UV-C	Oui
Câble	Longueur	2.0 m / Handpiece Detachable
	Connectivité	USB 3.1 Gen1 (C Power Delivery)

Configuration recommandée

Catégorie	Ordinateur portable	Ordinateur de bureau
CPU	Intel Core i9 - 10980HK AMD Ryzen 9 4900H/5900H	Intel Core i9 - 10900K AMD Ryzen 9 5900X
RAM	32 GB	
Graphic	Nvidia GeForce RTX 2070/2080/3070/3080/3090 Above 8GB (Not supporting Radeon)	
OS	Window 10 Pro 64-bit	

synergydental



Image Staged

La numérisation repensée

Ordinateur portable recommandé
La numérisation repensée Grâce à l'innovation et au service à la clientèle, nous menons la révolution de la dentisterie numérique. Nous croyons qu'en ajoutant une technologie de numérisation avancée à la dentisterie numérique, nous donnons aux dentistes les outils dont ils ont besoin pour fournir de meilleurs soins à leurs patients. En tant que société de numérisation la plus appréciée par les consommateurs, nous travaillons dur pour créer de nouvelles possibilités de numérisation jusqu'alors inimaginables grâce à une meilleure innovation et un meilleur service client.

synergydental

0 810 089 906

www.synergy-dental.fr

contact@synergy-dental.fr



www.medit.com